

Eletrocardiógrafo Átria 6100



Compacto e Fácil de Usar


O ECG Atria 6100 da Burdick aplica o mais alto nível de performance enquanto incorpora tecnologia de custos para modernizar o fluxo do trabalho clínico. Oferece uma alta qualidade e ECG preciso, que são resultados críticos para a saúde do paciente.

A tecnologia avançada dá a você o máximo em velocidade e precisão:

- Filtro de linha de base estável diminui o nível de artefato de interferência, assegurando que a linha de base do ECG fique estável, sem distorção das medições do segmento ST;
- Armazena 150 exames dos pacientes, aperfeiçoando o fluxo de trabalho para grandes rotinas;
- Configuração de diversos usuários, customizáveis e distintos;
- Modelos interpretativos incluem algoritmo para marcapasso;
- Escolha das fórmulas do cálculo do QTc, incluindo Hodges, Bazett, Framingham e Fridericia;
- Modelos interpretativos com comunicações que são compatíveis com os requerimentos da FAA e protocolos de EMR;
- Armazena até 150 ECGs na memória.

Características

- Automático, manual ou 12 canais do ritmo de operação permitem máxima flexibilidade;
- Pré visualização completa colorida permite a observação das formas de onda do ECG e navegação rápida;
- AccuPrint™ limita a impressão do ECG quando os eletrodos não estão fixados corretamente, garantindo uma impressão limpa e eliminando retomadas;
- Opções de comunicação incluindo Ethernet e wireless 802.11 que fornecem conectividade e possibilita tecnologia de custo.

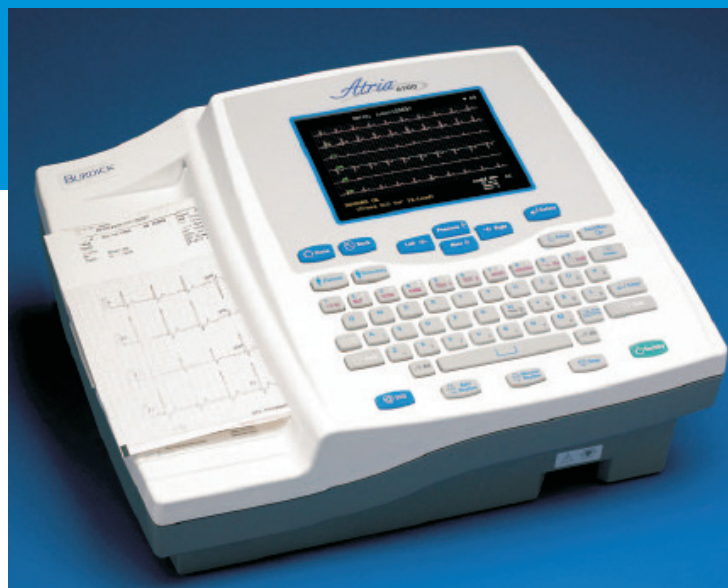

Uma segunda opinião que você pode contar

O Atria 6100 utiliza a interpretação com base no algoritmo da University of Glasgow.

- Diferente de outros produtos, que limitam a interpretação baseando-se apenas na idade, o algoritmo da University of Glasgow, que desenvolve a pesquisa desde 1970, baseia sua análise em 5 critérios clínicos: gênero, idade, raça, medicação e classificação. Isso é um fator muito importante pois diferentes dados demográficos e condições de medicação podem ocasionar uma variação importante no resultado da interpretação.

Upgrade a qualquer momento

- A qualquer momento você pode realizar um upgrade no Atria 6100;
- Adicione a opção de interpretação a qualquer momento;
- Aumente a capacidade de armazenamento de 150 para 300 exames;
- Aumente as opções de comunicação adicionando Ethernet, wireless 802.11, modem ou Bluetooth®.

Comunicações

Para usuários que procuram um equipamento tradicional e comunicação avançada com armazenamento eletrônico, o Atria 6100 com as opções de comunicação combina o melhor dos dois.

- Opções flexíveis de conectividade: inclui Ethernet e wireless 802.11, o que proporciona uma opção que otimiza a tecnologia de baixo custo. Transmissão de dados via XML: exames podem ser exportados do consultório ou sala de consultas para sistemas de EMR via XML. Dados podem ser transportados em formato PDF para qualquer computador conectado à rede, e serem visualizados sem a necessidade de adquirir programas específicos;
- Resultados no e-mail: permite que o usuário envie o exame de ECG diretamente do Atria 6100 para um e-mail habilitado, e esse exame pode ser visualizado em qualquer lugar do mundo;
- Impressora externa: exames podem ser enviados para qualquer impressora externa comum ligada à rede ou diretamente ao Atria 6100, via Ethernet, USB, wireless ou Bluetooth®. Exames impressos em sulfite A4 ou outros otimizam a tecnologia de baixo custo.



Unidade Campinas
R. Argentina, 188 - Jd. Nova Europa
Cep: 13040-017 Campinas - SP
Fone: (19) 3738-9600
Fax: (19) 3277-1434

Unidade São Paulo
R. Humberto I, 236 - Vila Mariana
Sala 111/112 - 11º andar
Cep: 04018-030 São Paulo - SP
Fone/Fax: (11) 5539-3636